

Strukturteile

Modulární díly

I komplikované tvary a délky pahýlů lze jednoduše a především individuálně odbavit. K tomu nabízíme rozsáhlý a promyšlený program modulárních dílů, které umožňují postavit funkční a moderní protézy.


Již mnoho let vyvíjejí naši techničtí pracovníci stavební díly, které jsou stoprocentně vyrobeny firmou Streifeneder. Přeměna nápadu v hotový výrobek se uskutečňuje v našich výrobních prostorech a odpovídá nejnovějším standardům kvality ISO. Modulární díly jsou zhotovovány z různých vysoce kvalitních slitin a podle nároků na ně kladených poskytují pacientům vysokou míru jistoty.

Nastavovacími šrouby a pyramidovými spojeními se vytvoří individuálně přizpůsobená stavba a statika protézy. Velký výběr různých adaptérů a jejich kombinovatelnost poskytuje při zhotovování pomůcek ortopedickým technikům velkou míru flexibility.

Kvalita
Made in Germany
je u našich výrobků
samozřejmostí.
Preciznost a dlouhá
životnost
za správné ceny.

Velká část našich dílů
z hliníkových slitin
je zatížitelná
hmotností 100 kg.
Tato okolnost
otvírá ortopedickým
technikům další
možnosti při výběru
modulárních dílů.



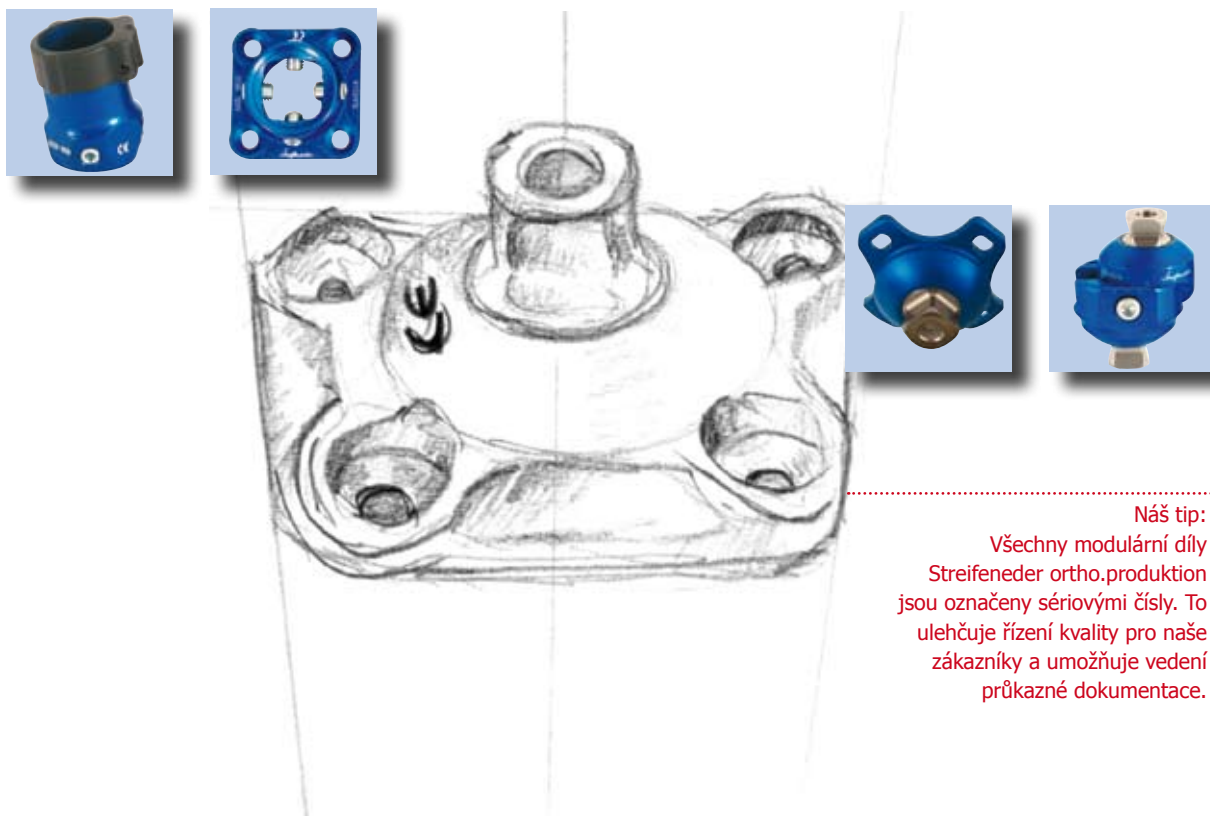

Technické informace k utahovacímu momentu

- Momentový klíč smí jen jednou cvaknout! Dalším utahováním se moment zvyšuje a může dojít k poškození modulárního dílu.
- Po cvaknutí opět momentový klíč povolte.
- Momentový klíč nechte v souladu s certifikací ISO jednou ročně kalibrovat. Tuto službu vám nabízíme.
- Loctite aplikujte podle doporučení v návodu pro použití.