

Vybavení pahýlů/lůžek

Sortiment punčošek

Požadavky na pahýlové punčošky jsou velmi vysoké a mnohostranné. Vnější plocha má být pokud možno hladká a odolná proti opotřebení, lem se musí dobře roztahovat a nesmí se zařezávat do pokožky. V přímém kontaktu s pokožkou se od nich vyžaduje kromě jiného prodyšnost, antialergické vlastnosti, rychlé schnutí, dobrá přilnavost a jemná struktura úpletu, která má zabránit oděru. V naší exkluzivní nabídce ochranných punčošek DAW máte k dispozici kvalitní a spolehlivé výrobky. Naše pahýlové punčošky jsou přizpůsobeny pro všechna použití a nabízíme je v různých provedeních.



Zvláštní vlastností a výhodou nylonových ochranných punčošek DAW jsou velmi tenké stehy, kterých doposud konkurenční modely nedosahují. Nasazení nových strojů ve výrobě umožňuje ještě lepší a rovnoměrnější obraz upletení.



Náš tip:


Ostré konce objímek vedou k předčasnému opotřebení pahýlových punčošek. Při stanovování jejich délky zohledněte, že 15 cm široký lem nylonové ochranné punčošky se nepočítá do celkové délky. Lem se ohrne přes okraj objímky, aby se zabránilo sklouznutí punčošky do objímky. Přetažený lem současně slouží jako ochrana oblečení proti poškození objímkou.

- prodyšné
- trvanlivé
- velký výběr pahýlových punčošek pro stehenní, bércevé a pažní pahýly
- včetně nebo bez otvoru pro trn, v různých tloušťkách, barvách a z různých materiálů
- zvýšení životnosti silikonových a gelových návleků
- kompensace změn objemu pahýlů
- dodatečné polstrování k lineru nebo ve vnitřní objímce samotné



Vybavení pahýlu/úžek

Sortiment punčošek - tabulka rozměrů

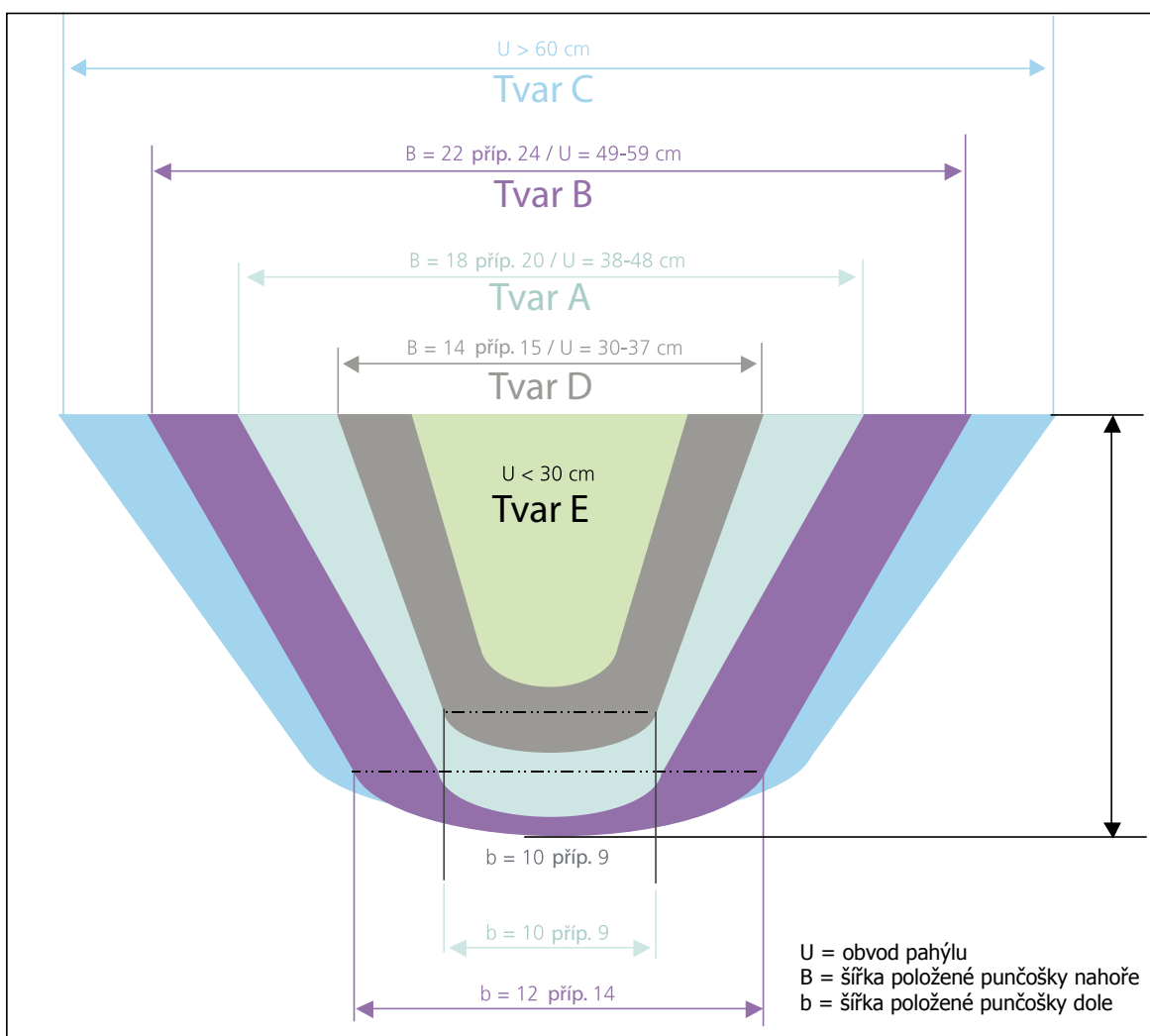

Obvod pahýlu (U)	< 30 cm	do 35 cm	do 50 cm	do 60 cm	> 60 cm
Tvar	E	D	A	B	C
Délka pahýlu (l)	15	-	-	-	-
	20	20	20	20	20
	25	25	25	25	25
	30	30	30	30	30
	35	35	35	35	35
	40	40	40	40	40
	45	45	45	45	45
	50	50	50	50	50
	-	55	55	55	55
	-	60	60	60	60
	-	65	65	65	65
	-	70	70	70	70
-	-	75	75	75	
-	-	80	80	80	
-	-	-	-	-	

Tabulka rozměrů odpovídajících pahýlových punčošek

Obvod pahýlu (U)	< 30 cm	30-33 cm	34-37 cm	38-43 cm	44-48 cm	49-52 cm	53-60 cm	> 60 cm
Šířka (B)		14 cm	15 cm	18 cm	20 cm	22 cm	24 cm	
Délka pahýlu (l)		14x10 cm	15x9 cm	18x9 cm	20x10 cm	22x12 cm	24x14 cm	
Šířka (b)		10 cm	9 cm	9 cm	10 cm	12 cm	14 cm	

Příklad objednávky:

Model	Konstanta	Tvar	Délka	Délka
Ochranná punčoška standard	25A50/	D	65 cm	25A50/D65
Ochranná punčoška pro liner	25A55/	A	50 cm	25A55/A50
Ochranná punčoška pro kolenní exartikulaci	25A51/	B	40 cm	25A51/B40