

Streifenederovy polymerové gely




Streifenederovy polymerové gely (Streifeneder Polymer Gel, SPG) jsou dermatologicky otestovány, potlačují množení bakterií a hydroalergenů. Současně jsou schopny absorbovat tlak, chránit pokožku a pečovat o ni. To se odráží v pacientově komfortu a jistotě.

Polymerové gely vyžadují hladké a měkčí vnitřní formy objímek. Objímka by neměla mít ostré výčnělky a malé tlakové body, protože v bodě dotyku s nimi dochází k tlakům na malé ploše, což může materiál ztenčit/vytlačit a vést v těchto místech k předčasné materiálové únavě. ContexGelové návleky jsou velmi komfortní, protože Streifenederovy polymerové gely - SPG - vykazují vysokou viskozitu. Tím se v nejkratší možné době docílí rovnoměrného rozložení tlakových poměrů v celém kontaktu s pahýlem.



Flexibilní:

Díky vysoké elasticitě se přizpůsobuje gel všem daným tvarům pahýlu a umožňuje tak optimální přizpůsobení a ulpění pacientovi.

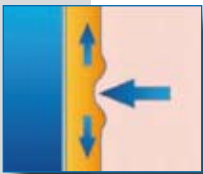

Tlak zmírňující:

Gel poskytuje i bez předchozího trvalého natvarování nejvyšší možnou ochranu před tlakem a stříhovými silami.



Pečující o pokožku:

Všechny gely obsahují lékařské minerální oleje. Tím se zajišťuje přirozená vlhkost pokožky, takže je jimi chráněna i velmi citlivá pokožka.



Omyvatelné:

Všechny výrobky z polymerových gelů - SPG - se lehce čistí. Jejich vlastnosti nejsou mytím ovlivněny.